

フローサイトメーターが最大で

# 50% OFF

キャンペーン期間：2017年12月27日（水）まで

高速・高精度 ハイスループットフローサイトメーター

## MACSQuant® X 発売記念キャンペーン

通常のフローサイトメーターとしてだけでなく、ハイスループットスクリーナーとしても使える、**高速・高精度フローサイトメーターMACSQuant X**の発売を記念して、**MACSQuant Analyzerシリーズ全機種**を、**最大50%OFF**でご提供いたします！  
キャンペーン対象機種について、詳細は裏面をご覧ください。

**NEW MACSQuant® X - サンプル吸引～解析可能データ取得 全自動15分/96well！**  
信頼性抜群の高速・高精度フローサイトメーター


- 3レーザー (404 nm, 488 nm, 635 nm)搭載、10パラメーター(FSC/SSC/8色)の解析が可能。
- 測定スピード： **15分/96 well plate**、**60分/384 well plate** (5 $\mu$ L up take/ Fast mode)
- 優れたオートメーション機能： 抗体染色、測定、メンテナンスの**すべてが自動化**できます。
- データ形式： MQD、FCS。1wellずつ独立したファイルとして保存されます。
- 細胞絶対数カウント： **Fast mode CV < 10%**、**Extended mode CV < 4%**
- Carryover (PBMC測定時)： **Fast mode < 3%**、**Extended mode < 0.01%**
- サンプル攪拌： 世界初！2タイプから選べる **Vibration needle** と **Orbital shaker**
- プレートとチューブの切り替え法：「**載せるだけ**」。特別な設定は不要です。
- MultiMACS™ X と MACSQuant X を組み合わせると細胞分離から解析まで**1つのプラットフォームで自動化**が可能。

広く見やすい画面  
15.6" HD touchscreen

### サンプル吸引部 (vibration needle)

最低1 $\mu$ Lから測定可能。wellやチューブの中で振動してサンプルを攪拌することも出来ます。振動数(300-1200 pwm)、振盪時間、タイミングを自由に設定出来ます。

簡単にロボットと  
接続できるデザイン

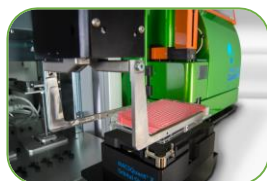

### MACSQuant X Orbital shaker

高精度なオートサンプラーに、プレートを2Dシェイクする機能が搭載されています。回転数(200-3000 rpm)、振盪時間、タイミングを自由に設定出来ます。


### Universal Reagent Rack

オートラベリング用試薬ラック。マイクロチューブやガラスバイアルを載せられます。



### コンパクト設計

W x D x H  
(Shaker設置/画面立位時)  
814x473x582 mm  
50 kg

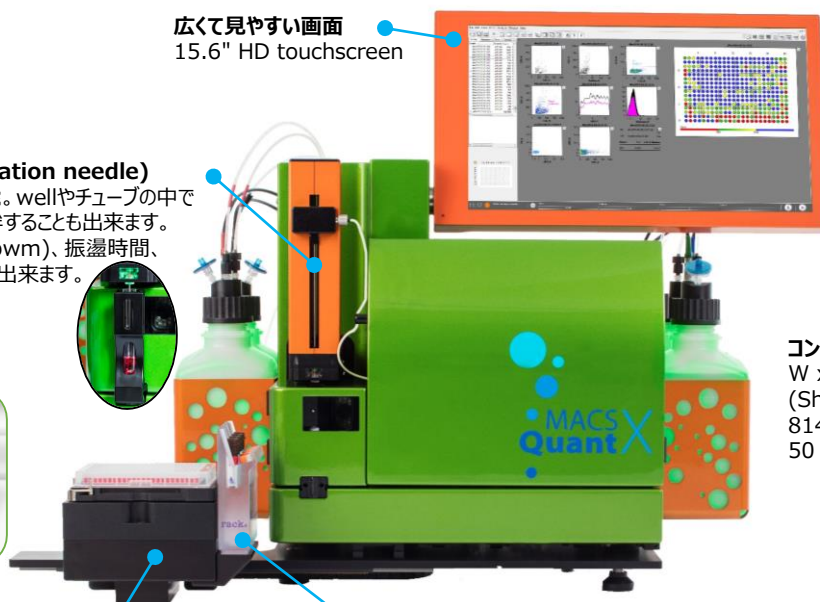



## キャンペーン対象製品

下記3通りの『MACSQuant本体+サンプラー』のセットをキャンペーン対象といたします。  
購入のご相談、資料請求、デモンストレーション依頼など、下記までお問い合わせください。

### 問い合わせ先

電話：03-5646-9606 (9:00-12:00/13:00-17:00)

メール：[macs@miltenyibiotec.jp](mailto:macs@miltenyibiotec.jp)

Violet / Blue / Red レーザー搭載 最大384well対応、シェーカー機能つきオートサンプラー

### ● MACSQuant® X + MACSQuant X Orbital shaker

希望納入価格合計 21,000,000円  
(税抜)



キャンペーン価格

16,800,000円  
(税抜)

Violet / Blue / Red レーザー搭載 最大96well対応オートサンプラー

### ● MACSQuant Analyzer 10 + MACS MiniSampler Plus

希望納入価格合計 17,500,000円  
(税抜)



キャンペーン価格

9,200,000円  
(税抜)

Violet / Yellow / Blue レーザー搭載 最大96well対応オートサンプラー

### ● MACSQuant VYB + MACS MiniSampler Plus

希望納入価格合計 19,500,000円  
(税抜)



キャンペーン価格

9,750,000円  
(税抜)

注目

### ミルテニーのリコンビナント抗体 REAfinity™抗体

Fc領域に変異を導入したことで、Fcγ レセプターにほとんど結合せず、ミエローマ由来の特異性の無い軽鎖を除去した、低lot間差・高性能フローサイトメトリー用抗体です。  
7000製品以上の豊富な品揃え！ぜひお試し下さい！



今すぐお問い合わせを！▶

検索

## Miltenyi Biotec



### ■ 販売元

## ミルテニー バイオテック株式会社

〒135-0041 東京都江東区冬木16-10 NEX永代ビル5F

TEL: 03-5646-8910(代) FAX: 03-5646-8911

【ホームページ】 [www.miltenyibiotec.co.jp](http://www.miltenyibiotec.co.jp)

【E-mail】 [macs@miltenyibiotec.jp](mailto:macs@miltenyibiotec.jp)

学術的なお問い合わせ 機器修理のお問い合わせ 代理店様専用番号  
03-5646-9606 ☎0120-03-5645 03-5646-8566

### ■ 取扱店

特別な明示が無い限り、Miltenyi Biotec製品とサービスは研究目的にのみ提供され、治療・診断・検査に用いることは出来ません。MACS、MACSQuantはMiltenyi Biotec GmbHの登録商標です。MultiMACS、REAfinityはMiltenyi Biotec GmbHの商標です。本パンフレットに記載されている商品名等は、特に記載はなくても各社の商標、または登録商標です。本パンフレットの内容の一部または全部を無断で転載あるいは複製することはご遠慮ください。