



Miltenyi Biotec

好評につき
2018年3月30日
まで延長!



自動磁気細胞分離装置

autoMACS® Pro Separator

期間限定 20%OFF キャンペーン

autoMACS Pro 使用例

マウス脾臓からの
CD4⁺T 細胞の分離

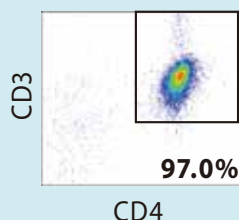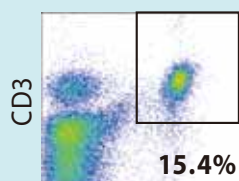

- MACS® テクノロジーに基づいた細胞に優しい分離
- 1秒間に1,000万個に及ぶ細胞処理
- 250種類を超えるマイクロビーズで多様な細胞をターゲットに
- 再現性の高い安定した結果
- タッチスクリーンで簡単操作
- クリーンベンチ内にも設置可能なコンパクトデザイン

www.miltenyibiotec.co.jp

キャンペーン内容

autoMACS® Pro Starting Kit

オーダー番号130-092-545

~~通常希望納入価格 ¥5,600,000~~



キャンペーン期間中
特別価格 ¥4,480,000

autoMACS® Pro Starting Kit	オーダー番号：130-092-545
autoMACS® Pro Separator	1台
MACS® MiniSampler	1台
MACS® Reagent Rack 4	1台
MACS® Cooling Tube Rack Chill 5、Chill 15、Chill 50	各1個
ソフトウェア	1本
バーコードリーダー	1台
autoMACS® カラム	10本
autoMACS® ダミーカラム	4本
autoMACS® Pro Buffer Combination*	1セット
ユーザーマニュアル、簡易操作マニュアル	各1冊
製品保証期間	1年間

★ autoMACS Buffer Combination には、autoMACS Running buffer (0.09% Azide 添加) が含まれます。

autoMACS Pro Separator の特長



複数サンプルの 自動連続分離

最大で 6 サンプルまでの自動連続分離が可能です。また同時に 4 種類の試薬を設置できます。分離中、サンプルは Chill Rack で冷却されるので細胞に優しい状態が保たれます。



優れた操作性

高解像度のタッチスクリーンと直感的な操作画面を採用することで、機器の取り扱いを容易にしました。煩雑な操作は必要なく、画面を指でタッチするだけで初めての方でも簡単に細胞分離が行えます。



センサーによる システムの監視・制御

autoMACS Pro は分離・洗浄はもちろん、バッファーの供給状況、分離カラムの状態、周辺機器の接続情報をセンサーにより常時監視して制御しています。

本体仕様	
分離プログラム	12種類
プロトコール	シングルおよびダブルカラム分離 ポジティブセクションおよびディブリーション
カラム容量	総細胞数：～4 X 10 ⁹ 個 磁気標識細胞数：～2 X 10 ⁸ 個 ヒト末梢血：0.25 - 15 mL
サンプル容量	0.2 - 50 mL
溶出容量	0.5 - 52 mL
設置面積*1,2	605 mm (幅) × 455 mm (奥行)
高さ	392 - 460 mm (調節可能)
重量	25 kg
電源	100 - 240 VAC、50-60 Hz
消費電力	200 VA

*1 MACS® MiniSampler 装着時の設置面積です。

*2 設置時には、電源プラグ・コード類のための余分な奥行スペースが必要になります。



Miltenyi Biotec

■ 販売元

ミルテニー バイオテック株式会社

〒135-0041 東京都江東区冬木16-10 NEX 永代ビル5F

TEL: 03-5646-8910(代) FAX: 03-5646-8911

【ホームページ】 www.miltenyibiotec.co.jp

【E-mail】 macs@miltenyibiotec.jp

学術的なお問い合わせ 機器修理のお問い合わせ 代理店様専用番号
03-5646-9606 ☎ 0120-03-5645 03-5646-8566

■ 取扱店

2017年12月現在の情報に基づきます。記載価格に消費税は含まれません。

MACS, autoMACSはMiltenyi Biotec GmbHの登録商標です。

記載されていない限り、Miltenyi Biotec社の製品およびサービスは全て研究用です。それ以外の目的に使用しないでください。